

Mil posibilidades. Con Discovery tmax.
El chasis de sedestación flexible.



Quality for life




Discovery tmax – descubre las posibilidades

Expandir horizontes, tener curiosidad y mantener ese estado: el discovery tmax lo hace todo posible – tanto para niños como para adultos. Lo único que importa es hacerlo lo más simple posible para cada uno.

- Una versión para niños y tres para adultos
- El ángulo de asiento se puede regular fácilmente hasta 50° para modificar el centro de gravedad
- Posibilidad de ajuste de anchura, profundidad y altura del asiento
- Robusta construcción

Flexible hasta el mínimo detalle

Descubre las posibilidades de ajuste

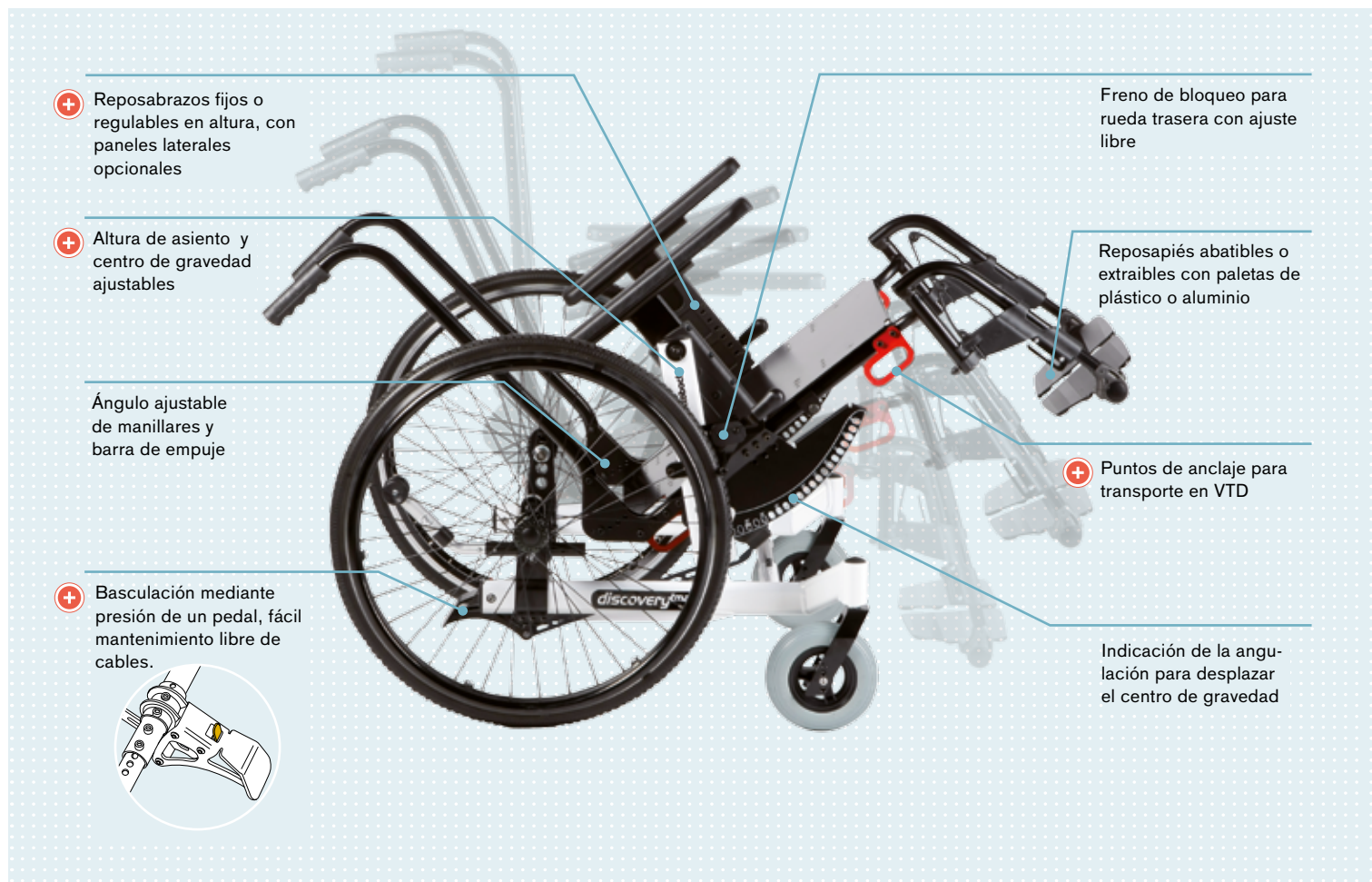

- + Reposabrazos fijos o regulables en altura, con paneles laterales opcionales**
Una basculación de hasta 50° provee el mejor soporte para evitar la formación de úlceras en el cuerpo. Además, el desplazamiento del centro de gravedad cuando se bascula otorga también una posición de sedestación confortable a la hora de llevar a cabo cualquier actividad.

- + Altura de asiento y centro de gravedad ajustables**
El ajuste de altura permite seguir usando el chasis a medida que crece el usuario. También es útil cuando se requiere un incremento en la altura del asiento, por ejemplo para comer.

- + Basculación mediante presión de un pedal, fácil mantenimiento libre de cables**
El pedal para bascular el asiento contiene un mecanismo de seguridad que no permite bascular el chasis si no se acciona. Al no llevar cables, no requiere ningún tipo de mantenimiento.

- + Puntos de anclaje para transporte en VTD**
Los anclajes para VTD permiten transportar el chasis en un vehículo adaptado con el usuario sentado encima.

Características, visión general:

- Una versión para niños y tres para adultos
- Apto para usar en interiores y exteriores
- Aprobado para transporte en VTD
- Ruedas macizas o neumáticas
- Anchura, profundidad y altura de asiento regulables en pasos de 2,5 cm / 1"
- Basculación mediante pedal libre de cables, de fácil mantenimiento y con resorte de seguridad
- Suave ajuste del ángulo de asiento sin émbolo gracias al centro de gravedad ajustable
- Combinable con varias unidades de asiento:
 - Asiento a medida Ottobock
 - Sistemas de respaldo estándar (p.ej.: Back)
 - Cojines para sillas de ruedas
 - Sistemas de sedestación modulares
 - Asientos personalizados

Datos técnicos

	Niños	Adultos		
	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Anchura del chasis	18-22 " (45–55 cm)	20-24 " (50–60 cm)	22-26 " (55–65 cm)	24-28 " (60–70 cm)
Ancho de asiento	12-16 " (30–40 cm)	14-18 " (35–45 cm)	16-20 " (40–50 cm)	18-22 " (45–55 cm)
Profundidad de asiento	12-16 " (30–40 cm)	15-19 " (37,5–47,5 cm)	15-22 " (37,5–55 cm)	15-22 " (37,5–55 cm)
Ruedas traseras	12"/16"/ 22"/24"	12"/16"/ 22"/24"	12"/16"/ 22"/24"	12"/16"/ 22"/24"
Ruedas delanteras	6"/7"/8"	6"/7"/8"	6"/7"/8"	6"/7"/8"
Altura de asiento	14-18 " (aprox. 35–45 cm)	16-20 " (aprox. 40–50 cm)	16-20 " (aprox. 40–50 cm)	16-20 " (aprox. 40–50 cm)
Basculación de asiento	-5°- +50°	-5°- +50°	-5°- +50°	-5°- +50°
Altura de respaldo	21 ó 24 " (53 ó 61 cm)	21-24 " (53 ó 61 cm)	21 ó 24 " (53 ó 61 cm)	21 ó 24 " (53 ó 61 cm)
Reclinación de respaldo	85–120°	85–120°	85–120°	85–120°
Longitud total	desde aprox. 52.5 cm / 21 "	desde aprox. 60 cm / 24 "	desde aprox. 60 cm / 24 "	desde aprox. 67.5 cm / 27 "
Peso del chasis (sin ruedas, reposabrazos, reposapiés)	33 lbs/15 kg	35,2 lbs/16 kg	36,3 lbs/16,5 kg	37,4 lbs/17 kg
Capacidad de carga	200 lbs/90 kg	300 lbs/136 kg	300 lbs/136 kg	300 lbs/136 kg

◉ cm/pulgadas, medidas redondeadas

Para información adicional, por favor visite nuestra página web
www.ottobock.es

Opciones adicionales



► Placa de asiento



► Anclajes para transporte en VTD



► Reposapiés de aluminio



► Pedal para basculación



► Barra de empuje regulable



► Antivuelco escamoteable

tmax para niños



► tmax con placa de asiento



► tmax con asiento a medida



► tmax con asiento a medida

Colores



Negro




Rojo jaspeado



Azul marino



Plata
metalizado

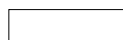

Blanco perla



Verde manzana
metalizado

Adicional para niños



Rosa



Púrpura

